


DURIA Ergänzungsupdates per USB-Stick/Netzwerklaufwerk

Das Einspielen von Ergänzungsupdates ist z.B. über USB-Sticks möglich, falls in der Praxis selbst keine Internetverbindung vorhanden ist.

Laden Sie zunächst die Dateien über das Internet unter www.duria.de herunter.

Über Software -> Downloads gelangen Sie in den Downloadbereich:

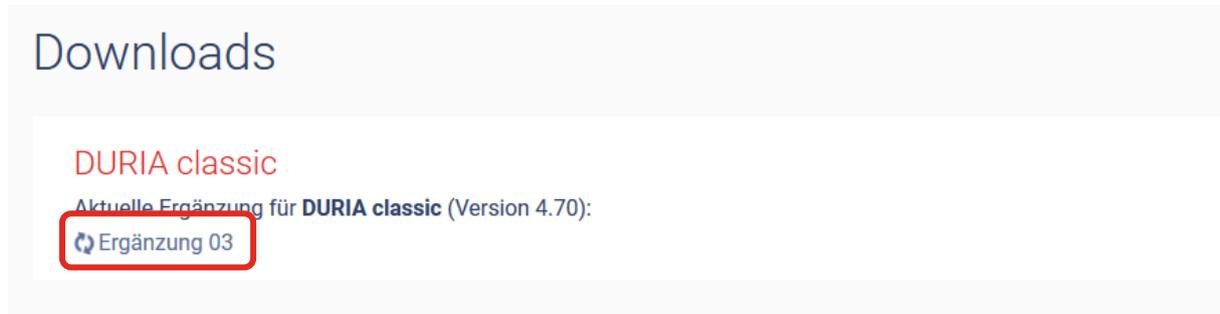


Dann muss der Inhalt der Datei auf den gewünschten Datenträger übertragen werden (*hier im Beispiel die Datei udp47003.exe*).

Wenn Ihr Browser „Ausführen“ anbietet, können Sie auf diesem Weg direkt auf das Laufwerk Ihrer Wahl „entpacken“, wird nur „Speichern“ angeboten, dann bitte auf dem Laufwerk der Wahl speichern und anschließend dort durch Doppelklick auf die Datei entpacken.





Eine ggf. angezeigte Sicherheitswarnung können Sie für diese Datei bestätigen.

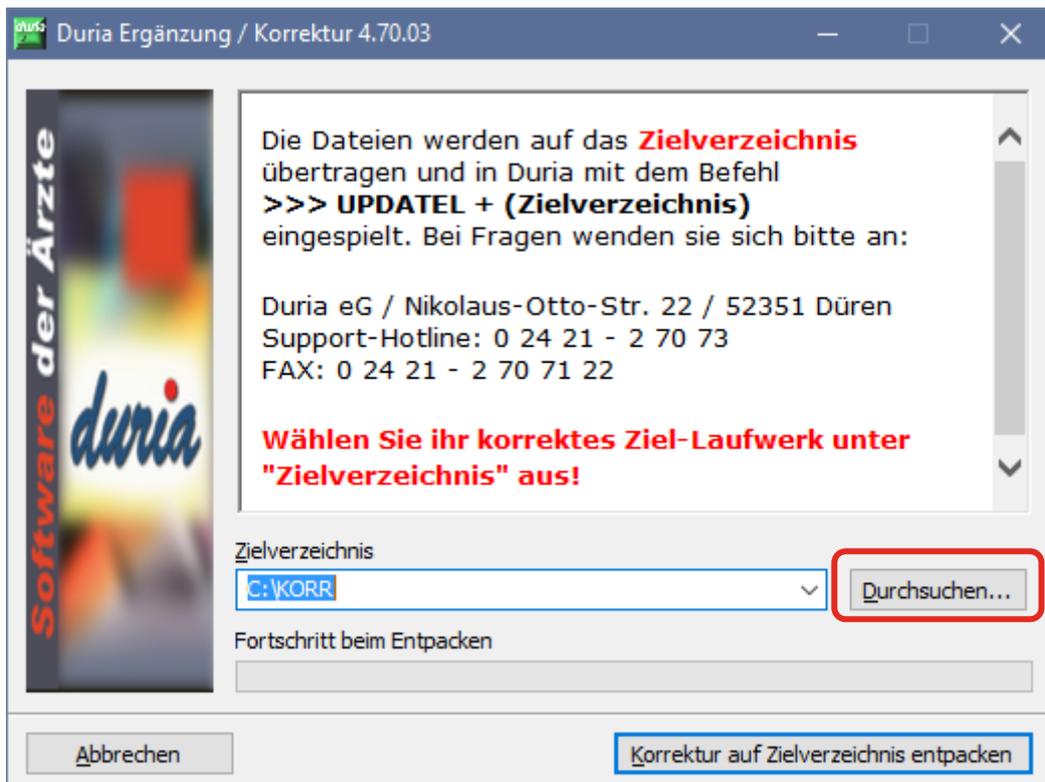


Wenn Sie also z.B. einen USB-Stick verwenden, dann müssen Sie über „Durchsuchen“ das Laufwerk des USB-Sticks auswählen ...

...und hier im Beispiel das Laufwerk **NAME (F:)** mit „OK“ bestätigen

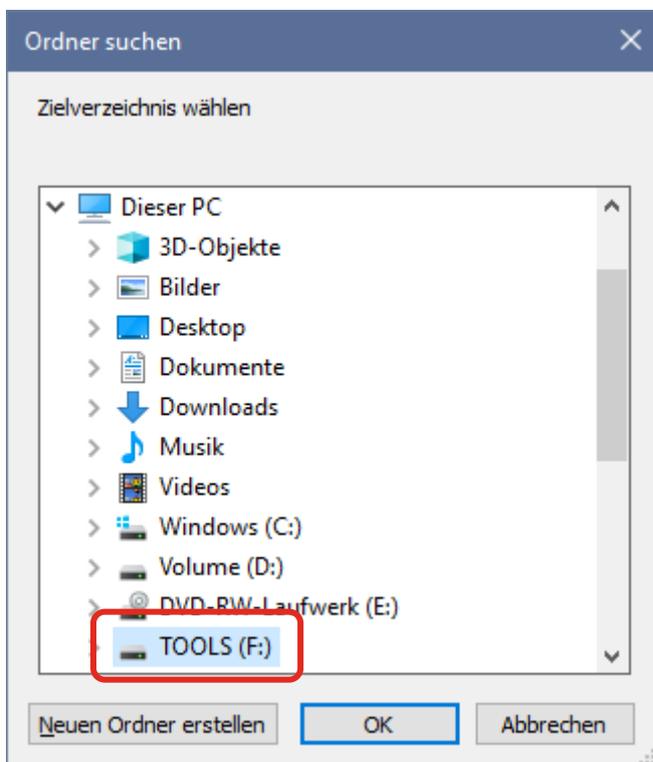

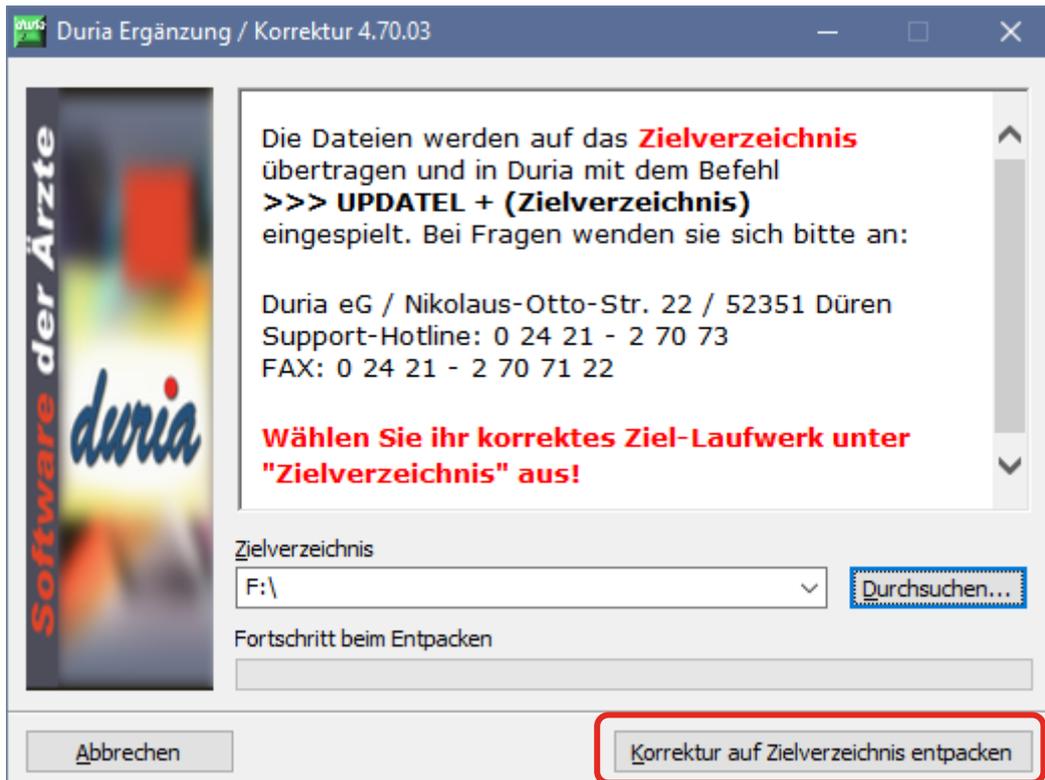

In dem gewählten Laufwerk werden die Dateien entpackt:

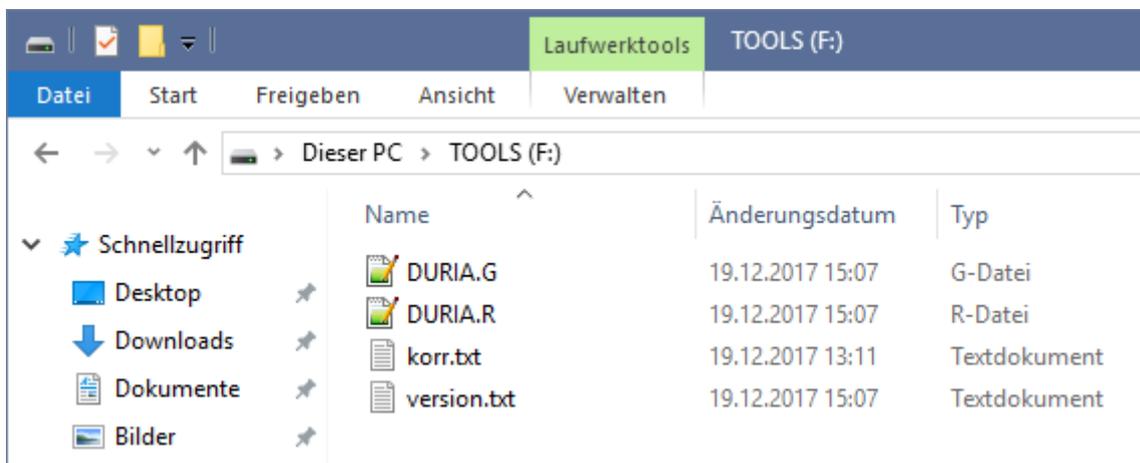

Hier im Beispiel sollte anschließend der USB-Stick über die Windows-Funktion „entfernt“ werden, um einen Datenverlust auf dem USB-Stick zu vermeiden. Mit dem USB-Stick gehen Sie dann zum Praxisserver, stecken ihn in einen freien USB-Port und warten darauf, dass der USB-Stick vom System erkannt wird.

Wichtig: Der Laufwerksbuchstabe, der hier zugeordnet wird, muss nicht mit dem Laufwerksbuchstaben auf dem Computer übereinstimmen an dem Sie das Update heruntergeladen haben.

In DURIA classic geben Sie dann in der Kommandozeile den alternativen Update-Befehl ein:
>>> update[...]*F*: (Hinter UPDATE [...] ist ein Leerzeichen, gefolgt vom Laufwerksbuchstabe des USB-Sticks, abschließend hinter dem Laufwerksbuchstaben einen „:“ (Doppelpunkt) & *mit der „ENTER“-Taste bestätigen.*)

```
>>>update f:
```

Es ist also leicht zu erkennen, dass dies kein allzu schwieriger Vorgang ist.
Bei Verständnisproblemen geht Ihnen gerne die technische Hotline oder Ihr DURIA-Support-Center zur Hand, spätestens beim zweiten Mal benötigen Sie keine Hilfe mehr.